

**Dyne 50bp DNA Ladder
(6X Loading dye mixed)**

◆ **제품사진**

Cat. No.	용량	농도
A705-C1	600 µl	-

◆ **보관방법**

- 20°C (1년)
- 4°C (6개월)
- 상온 (2개월)


◆ **제품설명**

· 본 제품은 100에서 1,000bp 사이에 10개의 DNA band와 1,500, 2,000bp의 추가 DNA band로 구성하고 있다. 이 중 500bp는 다른 band보다 3배의 양을 포함하여 기준 band로 이용 가능하다. 본 제품은 모두 이중가닥 DNA band로 구성하고 있으며, 5'-말단의 인산화 반응에 의한 방사능 표지가 가능하다.

◆ **사용방법**

· 아가로스 겔 전기영동 시 DNA 크기 마커로 사용 가능하다. 사용량은 1 lane 당 5 µl를 추천한다.

2.0% agarose gel (in 0.5X TAE buffer) 에서 확인

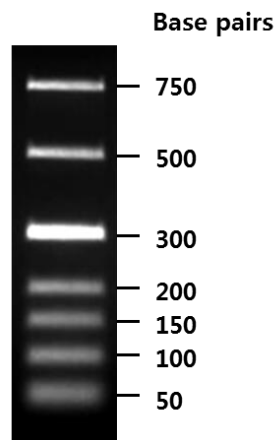

◆ **제품종류**

Cat. No.	품명	용량 (µl)
A701	Dyne 50bp DNA Ladder	500